


新氣密防護口罩

AIRTIGHT PROTECTIVE FACE MASK

平面口罩
革命性突破

氣密與效能大躍升

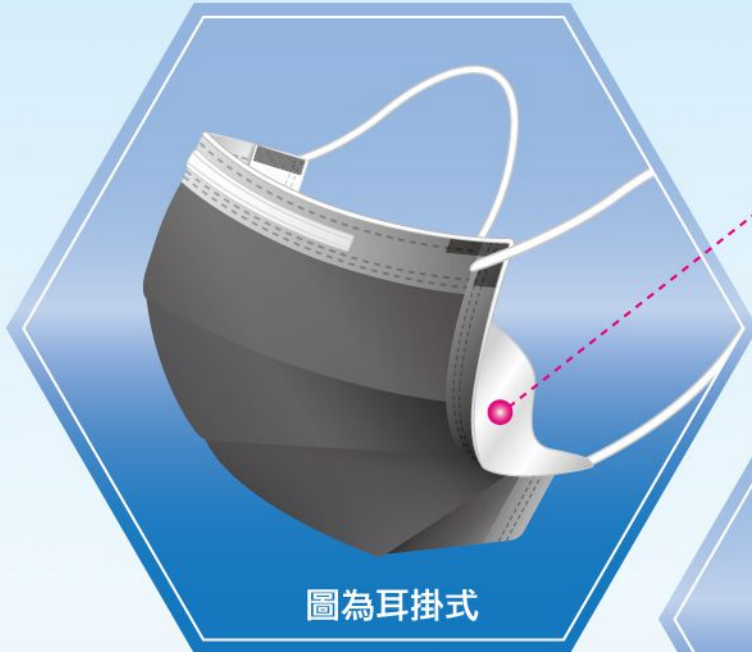


圖為耳掛式

▲ 適用範圍：平面型／鑽石型
一般醫用口罩·外科口罩
防塵口罩·活性炭口罩

▲ 適用型式：成人·兒童·幼幼

防漏氣密片
口罩側邊能有效防止洩漏

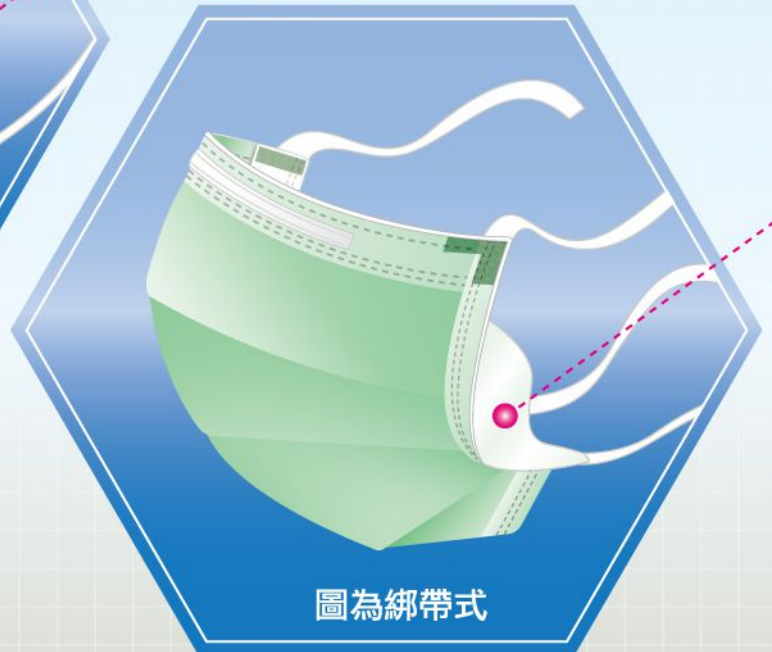

圖為綁帶式

▲ 適用範圍：平面型
外科綁帶口罩

具有三大功能及實用性：

1 安全有效

口罩配戴時藉由掛帶拉伸氣密片自然張開並與臉部緊密相貼，大幅降低側漏，以防止細菌、粉塵、塵霾從隙縫鑽入，且強化口罩密合度，使口罩配戴時更加安全舒適，為一般平面口罩密合度革命性的大突破。

氣密片可依口罩規格需具備一定過濾效能如：台灣外科口罩(PFE80%以上)、美規防塵口罩N95、歐盟FFP2系列或其他同等級規格標準，亦可適用於台灣標準CNS15980的防霾口罩。

2 結構新穎

創新設計，利用口罩不織布兩端包邊內面延伸及上下固接點生產一體成型，為新世代具高度氣密的新氣密防護口罩。

3 經濟實用

設計結構精簡，符合人體工學，可一體成型、適合全自動化生產、成本低廉，符合經濟實用原則。

口罩種類品項	醫療用		非醫療用		
	新氣密 衛署醫器製壹字號	一般用 衛署醫器製壹字號	新氣密 (服務業/工業用)	一般用 (民眾防護用)	
鑽石型 (超立體)	一般醫療口罩	○	●	▲	●
	外科手術口罩	○	●		●
	D2(N95/FFP1)口罩	○	●		
	一般型口罩			▲	●
	台灣 N80 防塵口罩			▲	●
	醫療活性碳口罩		●	▲	●
	香氛口罩			▲	●
	防霾口罩			▲	●
平面型	一般醫療口罩	○	●	▲	●
	外科手術口罩	○	●	▲	●
	一般口罩			▲	●
	醫療活性碳口罩	○	●	▲	●
	吸食口罩			▲	●
	吸水面罩(開口型)				●
	吸水面罩(一般型)				●
	護目口罩	○	●	▲	●
防霧口罩	○	●	▲	●	
超立體型 (蚌型)	防霾口罩(A 級)				●
	防霾口罩(B/C 級)				●
	防塵(N95/FFP2)口罩				●
	防塵(N80/FFP1)口罩				●
	運動口罩(可附呼吸閥)				●
其他型	折疊型(N95/ FFP2)口罩		●		●
	折疊型(N80/FFP1)口罩		●		●
	C 型雲朵口罩				●

備註：●原有產品 ▲新產品 ○計畫中產品